

Bruksanvisning för bakom örat -hörapparat



- Att sätta i hörapparaten
- Att ta bort hörapparaten
- Att byta batteri på hörapparaten
- Att byta slang
- Att tänka på

Att sätta i hörapparaten



Ta tag i den del av öroninsatsen som ska vara utanför örat och placera den vid örat så att hörapparaten är högst upp.



**Placera öroninsatsens främre del i hörselgången.
Tryck öroninsatsen på plats med ett stadigt grepp.**



Lyft hörapparaten över öronsribben.

Att ta bort hörapparaten



Lyft hörapparaten ovanpå öronsnibben.




Fatta tag vid skarven mellan öroninsatsen och slangen.



Dra öroninsatsen ur örat.

**Öppna batteriluckan.
Förvara apparaten i dess fodral.**

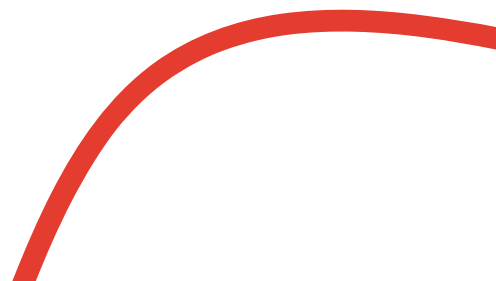

Att byta batteri



Kontrollera vilken storleks batteri som passar till din hörapparat.

Orange klistermärke: storlek 13

Brunt klistermärke: storlek 312



Ta bort klistermärket från batteriet. Låt batteriet ligga på bordet i cirka 15 minuter och luftas.



Öppna batteriluckan helt.



**Ta bort det gamla batteriet.
Det kan föras till
batteriåtervinningen.**



**Sätt in det nya
batteriet. Placera
+ tecknet uppåt.
Tänk på att ha rena
och torra fingrar.
Du kan också använda
ett magnetverktyg.**



**Stäng batteriluckan.
Sätt hörapparaten i örat.**

**Strömmen slås på när batteriluckan i apparaten stängs.
Strömmen slås av automatiskt när batteriluckan öppnas.**



Att byta slang

Kom ihåg att byta slang en gång i månaden.



Avlägsna slangen från hörapparaten och öroninsatsen.



Använd den gamla slangen som mått när du klipper en ny slang.



Fäst den nya slangen i hörapparaten och öroninsatsen. Se till att fästa apparaten och öroninsatsen åt rätt håll.



Spara resten av den nya slangen. Förvara slangen i en lufttät sluten påse.

Att rengöra öroninsatsen

Kom ihåg att rengöra öroninsatsen varje vecka.



Avlägsna öroninsatsen från slangen.



Rengör öroninsatsen med varmt vatten. Använd vid behov mildt flytande rengöringsmedel. Låt vattnet rinna genom ljudkanalen så att det vax som samlats där sköljs bort.



Torka öroninsatsen noggrant med papper och torkpump.



Fäst öroninsatsen i slangen.



Att tänka på



- Batteriet håller 2–7 dagar.
- Kom ihåg att anteckna i kalendern när du byter batteri i apparaten.
- Använd inte apparaten när du badar bastu, duschar eller simmar.
- Om apparaten blir fuktig till exempel när du svettas, ska du öppna batteriluckan helt och låta apparaten torka i rumstemperatur.

www.kuuloliitto.fi

Låt hörapparaten bli en del av din vardag!

Foton: Jenni Oranen/JenoraDesign



Kuule ja muista



Kuuloliitto