

Bruksanvisning för i örat -hörapparat



- Att sätta i hörapparaten
- Att ta bort hörapparaten
- Att byta batteri på hörapparaten
- Att byta vaxskydd
- Att tänka på

Att sätta i hörapparaten



Ta tag i domen, alltså tippen, med tummen och pekfingeret.



Placera domen vid hörselgången och tryck in. Domen kan inte hamna för djupt i örat.



Lyft hörapparaten bakom örat.

Att ta bort hörapparaten



Lyft hörapparaten ovanpå öronsribben.



Ta tag i utdragstråden eller slangen och dra dom ut ur örat.



**Öppna batteriluckan.
Förvara apparaten i dess fodral.**

Att byta batteri



Kontrollera vilken storleks batteri som passar till din hörapparat.

Orange klistermärke: storlek 13

Brunt klistermärke: storlek 312



Ta bort klistermärket från batteriet. Låt batteriet ligga på bordet i ca 15 minuter och luftas.




Öppna batteriluckan helt.



**Ta bort det gamla batteriet.
Det kan föras till
batteriåtervinningen.**



**Sätt in det nya batteriet.
Placera + tecknet uppåt.**

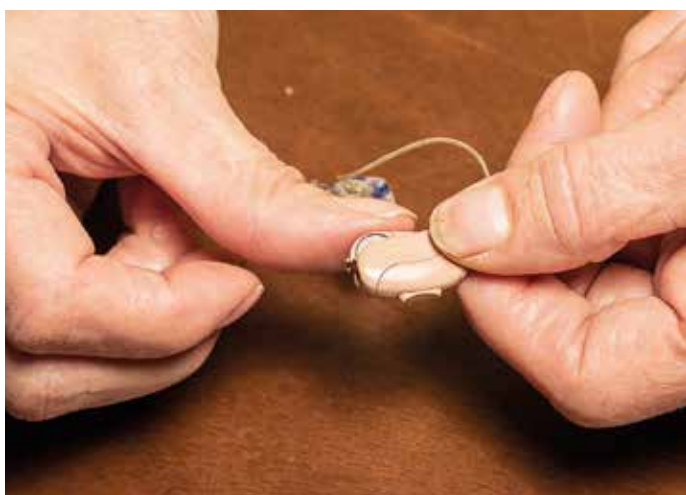

**Stäng batteriluckan.
Sätt hörapparaten i örat.**

**Strömmen slås på när batteriluckan i apparaten stängs.
Strömmen slås av automatiskt när batteriluckan öppnas.**

Att byta vaxskydd

Om din hörapparat har en avtagbar dome i ljudslangen ska du börja med att ta bort domen för att komma åt vaxskyddet. Om din hörapparat har en fast dome i ljudslangen syns vaxskyddet i domen.



Vaxskyddet i änden av ljudslangen ska bytas med cirka 1-2 månaders mellanrum efter behov.



Ta ut vaxskyddapplikatorn ur fodralet.



Tryck den öppna änden av vaxskyddapplikatorn mitt i det gamla vaxskyddet och ta bort det.



Byt till ett nytt vaxskydd från andra änden av vaxskyddapplikatorn.

Kom ihåg



Torka domen varje dag med en torr duk. Ta bort öronvax som samlats i domen genom att torka den.



Om det finns en avtagbar dome i ljudslangen ska den bytas cirka en gång i månaden. Om domen inte längre är elastisk eller du inte lyckas rengöra den kan du byta ut den tidigare.

Att tänka på



- Batteriet håller 2-7 dagar.
- Kom ihåg att anteckna i kalendern när du byter batteri i apparaten.
- Använd inte apparaten när du badar bastu, duschar eller simmar.
- Om apparaten blir fuktig till exempel när du svettas, ska du öppna batteriluckan helt och låta apparaten torka i rumstemperatur.

www.kuuloliitto.fi

Låt hörapparaten bli en del av din vardag!

Foton: Jenni Oranen/JenoraDesign



Kuule ja muista

 **Kuuloliitto**